


Páčkový nožní ovladač A-dec

Přehled

Nožní ovladač reguluje přívod vzduchu do aktivního násadce koncovky a přivádí signál, který aktivuje proud chladícího vzduchu a vody.

Přepínač přídavného zařízení/výfuku vzduchu aktivuje funkci přídavného zařízení nebo výfuku vzduchu. Výfuk vzduchu vhání do násadce proud vzduchu, aniž by došlo k aktivaci nástroje na násadci. Funkce přídavného zařízení závisí na typu integrovaného zařízení. Podrobnosti vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti A-dec.

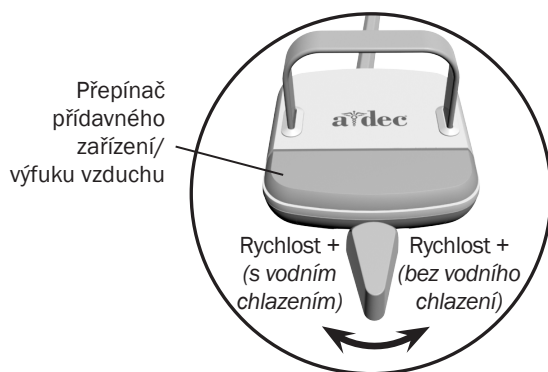

Aktivace a obsluha násadce

Chcete-li aktivovat násadec, vytáhněte jej z držáku nebo vytáhněte bičové vedení dopředu. Pomocí nožního ovladače proveďte požadovanou operaci s násadcem.

Obsluha	Postup
Spusťte násadec s vodním chlazením.	Posuňte páčku doleva. Čím více páčku posunete, tím větší bude rychlost.
Spusťte násadec bez vodního chlazení.	Posuňte páčku doprava. Čím více páčku posunete, tím větší bude rychlost.
Spusťte volitelné přídavné zařízení nebo výfuk vzduchu.	Přepněte přepínač přídavného zařízení/výfuku vzduchu.*
Použijte intraorální kameru.	Posunutím páčky doleva nebo doprava pořídíte snímek.*

* S otázkami o obsluze nebo konfiguraci vestavěných příslušenství A-dec se obraťte na autorizovaného zástupce společnosti A-dec.



POZNÁMKA Funkci páčkového nožního ovladače může technik změnit (levý směr na bez vodního chlazení, pravý směr na vodní chlazení). Podrobnosti vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti A-dec.



POZNÁMKA Informace o nastavení násadce naleznete v návodu k použití dodaném se stomatologickým unitem.

Technické údaje a záruka

Informace o záruce jsou uvedeny v dokumentu *Povinné informace, technické údaje a záruka* (č. 86.0221.11), který je k dispozici v knihovně dokumentů na adrese www.a-dec.com.



Sídlo společnosti A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
USA
Tel.: 1 800 547 1883 v USA a Kanadě
Tel.: 1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu
Fax: 1 503 538 0276
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Austrálie
Tel.: 1 800 225 010 v Austrálii
Tel.: +61 (0)2 8332 4000 mimo Austrálii

A-dec China

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, Čína
Tel.: +1 503 538 7478

A-dec United Kingdom

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglie
Tel.: 0800 ADECUK (233285) ve Velké Británii
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 mimo Velkou Británii

86.0559.11 Rev B
Copyright 2015 A-dec Inc.
Všechna práva vyhrazena.