


A-dec-Fußbedienung per Hebel

Übersicht

Der Fußschalter regelt die Antriebsluft zum aktiven Handstück und liefert ein Luftsignal zur Aktivierung von Sprayluft und Spraywasser.

Der Schalter für Zubehör/Spanbläser aktiviert eine Zubehörfunktion am Spanbläser. Der Spanbläser sendet einen Luftstoß durch das Handstück, ohne den Handstückbohrer zu aktivieren. Die Zubehörfunktion ist von Ihrem integrierten Zubehörgerät abhängig. Genauere Informationen können von autorisierten A-dec Vertragshändlern eingeholt werden.

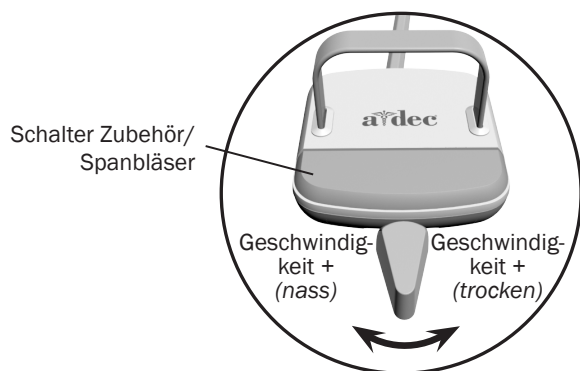

Aktivierung und Bedienung des Handstücks

Zum Aktivieren eines Handstücks heben Sie es aus dem Halter oder ziehen den Spanner nach vorn. Verwenden Sie die Fußbedienung, um die gewünschte Funktion des Handstücks zu nutzen.

Gebrauch	Verfahren
Setzen Sie ein Handstück mit Wasserkühlung in Betrieb.	Schieben Sie den Hebel nach links. Schieben Sie ihn weiter, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Setzen Sie ein Handstück ohne Wasserkühlung in Betrieb.	Schieben Sie den Hebel nach rechts. Schieben Sie ihn weiter, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Setzen Sie das optionale Zubehör bzw. den Spanbläser in Betrieb.	Betätigen Sie die Taste für Zubehör/ Spanbläser.*
Setzen Sie die Intraoral-Kamera in Betrieb.	Schieben Sie den Hebel nach links oder rechts, um ein Bild aufzunehmen.*

* Bei Fragen zur Bedienung oder Konfiguration Ihres integrierten A-dec-Zubehörs wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten A-dec-Händler.



HINWEIS Die Fußbedienungsfunktion per Hebel kann durch einen Techniker umgekehrt eingestellt werden (nach links für trocken, nach rechts für nass). Genauere Informationen können von autorisierten A-dec Vertragshändlern eingeholt werden.



HINWEIS Informationen zur Anpassung des Handstücks erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Zahnarztelements.

Technische Daten und Garantie

Informationen zur Garantie finden Sie im Dokument „*Aufsichtsbehördliche Angaben, technische Daten und Garantie*“ (Teilenr. 86.0221.03) in unserer Dokumentenbibliothek unter www.a-dec.com.



A-dec Hauptniederlassung

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
USA

Tel: +1 800 547 1883 innerhalb der USA/Kanada
Tel: +1 503 538 7478 außerhalb der USA/Kanada
Fax: +1 503 538 0276
www.a-dec.com

A-dec Australien

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australien
Tel: +1 800 225 010 innerhalb von Australien
Tel: +61 (0)2 8332 4000 außerhalb von Australien

A-dec China

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, China
Tel.: +1 503 538 7478

A-dec Großbritannien

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
England
Tel: 0800 ADECUK (233285) innerhalb von GB
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 außerhalb von GB

86.0559.03 Rev B
Copyright 2015 A-dec Inc.
Alle Rechte vorbehalten.