


A-dec® 300

a dec®

Het A-dec verschil

Gemaakt voor het leven

Bij A-dec letten we ook op de allerkleinste details, zoals de bouten die we in onze producten gebruiken. Het merendeel van onze tandheelkundige apparatuur vervaardigen we dan ook uit grondstoffen; dat is essentieel voor het waarborgen van kwaliteit. Want hoewel deze onderdelen niet zichtbaar zijn met het blote oog, maken ze het verschil in levensduur, comfort en functionaliteit van elk product dat onze naam draagt. En voor uw bedrijf betekent dat alles.

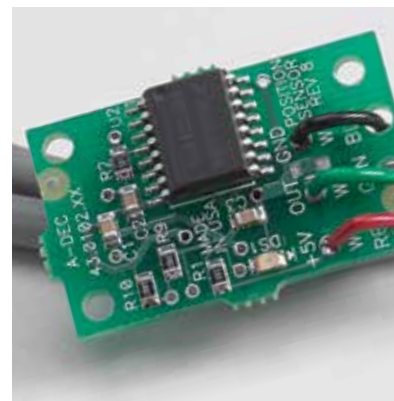

Stuurblok – Gepatenteerd ontwerp voor schoon behandelingswater bij elk gebruik.

Hefcilinder – Door A-dec ontworpen en gebouwd met krachtige hydraulica en minder onderdelen.

Sensor voor de positie van de behandelstoel – A-dec technologie maakt gebruik van nauwkeurige elektronische sensoren en digitale signalen.







A-dec 300: geëvolueerd

Ontwerp

Een solide grondplaat is de basis van een stevige stoel. Afgezien van een sterk voetstuk is de A-dec 300 bovendien uitgerust met een hydraulische liftcilinder, waarmee u patiënten geruisloos en soepel in de juiste positie plaatst.

De cilinder heeft een verwachte levensduur van 20 jaar.

Waarde

De A-dec 300 is een volledig systeem, ontworpen als een modulaire oplossing. U kiest zelf de functies die u nodig hebt, binnen het gewenste budget.

Flexibiliteit

Traditional of Continental, de keuze is aan u. Of u nu een instrumentenbrug voor links- of rechtshandigen kiest of een met beide handen te bedienen configuratie in Radius®, alle hand- en hulpstukken zijn eenvoudig binnen uw bereik.

Comfort

De A-dec 300 biedt steun voor drukpunten van het lichaam, geprofileerde oppervlakken en een virtuele draaibare rugleuning voor een ontspannen patiëntervaring. Geschikt voor patiënten tot 181 kg.

Toegang

Terwijl uw patiënt het comfort heeft van de dubbel articulerende hoofdsteun, is hij of zij voor u optimaal bereikbaar dankzij het slanke profiel van de stoel en de ultradunne rugleuning. Ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring draagt deze combinatie bij aan een betere positionering voor uzelf en eenvoudige bereikbaarheid van de mondholte.





Ergonomisch en voordelig

Wie zegt dat ultiem comfort onhaalbaar is? Elke behandelstoel en elke werkstoel voor tandartsen of assistenten die door ons wordt ontworpen, is het resultaat van decennialang onderzoek, dialogen, tests en verbeteringen. De meest eenvoudige rondingen, soepele lijnen en inherente contouren hebben voortdurend onze aandacht, zodat we zeker zijn van een uitzonderlijke efficiëntie en ultiem comfort. U kunt ervan op aan dat de betaalbare A-dec 300 geen uitzondering is.

Werkt zoals u dat doet

Op een grondplaat gemonteerd of Radius, u kiest. Bij beide opties heeft u uw instrumentarium steeds binnen bereik, zodat u de behandeling niet hoeft te onderbreken.



A-dec 300-watereenheid op grondplaat

Met een Traditional- of Continental-instrumentenbrug haalt u geavanceerde technologie naar uw praktijk. Links of rechts gerichte instrumentenbrug voor moeiteloze toegang tot de amalgaanscheiding. De mooi afgewerkte, geprofileerde vloerkast voorkomt dat aansluitingen en leidingen zichtbaar zijn.



A-dec 300 Radius systeem

Moeiteloos wisselbaar tussen rechtshandige en linkshandige bediening. Enkele of dubbele Radius-montage roteert rond de voorzijde van de stoel, zodat de patiënt tijdens behandelprocedures makkelijk bereikbaar is.



Voetpedaal met schuif

De voetpedaal met schuif van A-dec geeft u volledige controle. Dankzij de intuïtieve horizontale nat/droog werking en de knop voor schilferblazer/ accessoire kunt u zich volledig richten op de behandeling van de patiënt zonder weg te hoeven kijken. Een minimale beweging van uw voet volstaat voor het nauwkeurig afstellen van elektrische en pneumatische handstukken.

Zo veel keuze



Gestikte bekleding, met armsteunen



Traditional



Standaard bedieningspaneel



Voetpedaal met schijf



Naadloze bekleding, zonder armsteunen



Continental



Deluxe bedieningspaneel



Voetpedaal met schuif

Bekleding en armsteunen

Het begint met een geweldige stoel. U hebt talloze opties, van gestikte of eenvoudig te reinigen naadloze stoelbekleding tot optionele armsteunen met twee standen of geen armsteunen.

Instrumentenbruggen

Hoe werken u en uw assistenten? In Traditional- en Continental-instrumentbruggen kunnen een intraorale lichtbron voor vier instrumenten en twee accessoires worden geïntegreerd.

Bedieningspaneel

Bediening binnen handbereik voor eenvoudige aanpassing van de behandelstoel en snelle toegang tot de besturing van de behandelamp en spittoon. Optioneel luxe touchpad dat besturingsfuncties toevoegt voor geïntegreerde klinische instrumenten, zoals elektrische motoren, camera's en tandsteenverwijderaars.

Voetpedalen

Schijf met schilferblazer, of het A-dec voetpedaal met schuif voor het nauwkeurig afstellen van elektrische en pneumatische handstukken.



Vaste glazen spittoon



Houder met drie posities



Houder met vier posities



Dubbele houder met twee posities



A-dec 300-ledlamp



A-dec 500-ledlamp



Radius-monitormontage



Monitormontage lamp



Monitormontage lamp met arm



Draaibare spittoon van doorzichtig porselein

Spittoons

Wat heeft uw voorkeur, glas of porselein? Vast of draaibaar? Beide kommen hebben een tijdgestuurde bekervuller en spuwkomspoeling.

Houders voor assistentinstrumentarium

Plaats de assistentinstrumenten waar die het meest nodig is. Afstelbare houders met drie of vier posities zijn verkrijgbaar als stoelbevestiging, spittoonbevestiging of telescooparm.

Tandartslampen

Nauwkeurige verlichting is essentieel. A-dec ledlampen leveren gebalanceerde intensiteit en een uniform lichtpatroon zonder schaduwen. Schakelt automatisch in of uit wanneer stoel naar in- of uitstappositie wordt verplaatst.


Monitorbevestigingen

Consulteer. Onderwijs. Controleer. Monitorbevestigingen zijn kantelbaar, zodat de monitor zowel vanuit een zittende als een liggende houding kan worden bekeken. Pas uw opties naar eigen wens aan, inclusief vaste of kantelbare optie, hendel om de monitor te positioneren en verschillende bevestigingspunten.

Naadloze stoelbekleding



Kleur is van groot belang voor het creëren van een omgeving die bij u past. A-dec biedt u daarom een breed scala aan kleuren en bepaalde opties voor het op elkaar afstemmen van naadloze en gestikte bekledingen.

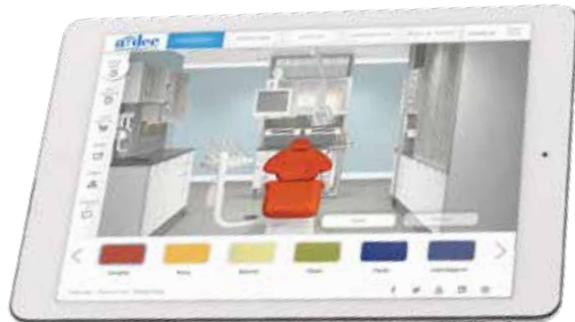

**Bestel uw stalen via
a-dec.com/InspireMe**

Gestikte stoelbekleding



Feitelijke kleuren kunnen variëren. Neem voor kleurstalen en de meest recente productinformatie contact op met uw erkende A-dec dealer.

Specificaties

A-dec 300 behandelstoel

Hefhoogtebereik	349 mm tot 800 mm (13,75" tot 31,5"); laagtepunt 375 mm (14,75") bij dubbele montage
Dunne flexibele rugleuning	32 mm (1,25"), naadloos
Aandrijfsysteem	Hybride aandrijving (elektromechanische rugleuning, hydraulische basis)
Afslagschakelaar voor rugleuning en stoelbasis	Ja. Onderbreekt neerwaartse beweging wanneer obstructie wordt vastgesteld
Hoofdsteun	Dubbel articulerend en verstelbaar (met knop)
Geïntegreerde voeding van 300 watt	Ja
Voetschakelaar	Optioneel
Montagemogelijkheid	Zwevend - bevestigd links of rechts aan de stoel of Radius (enkele of dubbele montage)
Bekledingopties	Gestikt of naadloos

Instrumentenbruggen

	A-dec 300 Continental	A-dec 300 Traditional
Stuurblok	Standaard 3 posities, optioneel 4 posities	Standaard 3 posities, optioneel 4 posities
Links/rechts-omzetting	Ja	Ja
Slangopties	Vinyl of silicone	Vinyl of silicone
Posities van de handstukhouders	4	4
Remhendel(s)	1 standaard, 2de optioneel	1 standaard, 2de optioneel
Bedieningspaneelopties	Geen, standaard of Deluxe	Geen, standaard of Deluxe
Intraorale lichtbron voor vier instrumenten	Optioneel	Optioneel
Voetpedaal	Standaard, schilferblazer of schuif	Standaard, schilferblazer of schuif
Armsysteem	Gebalanceerde flexarm met luchtrem A-dec 333 - Radius-montage A-dec 335 - Watereenheidmontage	Gebalanceerde flexarm met luchtrem A-dec 332 - Radius-montage A-dec 334 - Steunmontage Handmatige hoogteafstelling A-dec 336 - Radius-montage









Hoofdkantoor A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132, VS
Tel: 1.800.547.1883 binnen VS/Canada
Tel: 1.503.538.7478 buiten VS/Canada
Fax: 1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australië

Tel: 1.800.225.010 binnen AUS
Tel: +61 (0)2 8332 4000 buiten AUS

A-dec China

Tel.: 400.600.5434 binnen China
Tel.: +0571.89026088 van buiten China

A-dec Verenigd Koninkrijk

Tel: 0800.233285 binnen VK
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 buiten VK

De getoonde kleuren en producten kunnen verschillen van de werkelijke materialen en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Neem voor nauwkeurige kleurstaal en de meest recente productinformatie contact op met de erkende A-dec-dealer.

Alle handelsmerken in dit document vallen onder de handelsmerkrechten van A-dec, de dochterondernemingen en hun gemeenschappelijke leveranciers in de Verenigde Staten en daarbuiten.