


A-dec® 300

a dec®

A-dec robi różnicę

Trwałość na lata

W firmie A-dec zwracamy uwagę na każdy element, nawet śruby używane w naszych produktach. Dlatego większość naszych wyrobów produkujemy od początku z surowców; jest to czynnik decydujący o jakości. Te części mogą być niewidoczne, ale stanowią o trwałości, komforcie i funkcjonalności wszystkich produktów naszej marki. A dla Twojej działalności ma to kluczowe znaczenie.

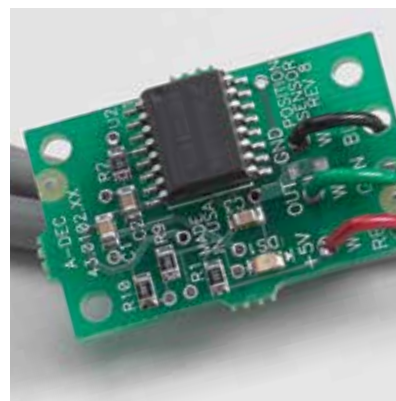

Blok sterowania końcówkami –

Opatentowana konstrukcja sterująca rozdziałem czystej wody do zabiegów przy każdym uruchomieniu.

Siłownik hydrauliczny – Opracowany i skonstruowany przez firmę A-dec; trwała konstrukcja z mniejszą ilością części i 10-letnią gwarancją.

Czujnik położenia fotela –

Technologia A-dec wykorzystuje, oprócz sterowania pneumatycznego, precyzyjne elektroniczne czujniki i sygnały cyfrowe.







A-dec 300: Ewolucja

Konstrukcja

Solidna płyta podstawy jest fundamentem trwałego fotela. Umieszczony na stabilnej podstawie fotel A-dec 300 pozwala w sposób cichy i płynny uzyskać pożądaną pozycję pacjenta za pomocą podnośnika, którego siłownik hydrauliczny wytrzyma 20 lat eksploatacji.

Wartość

Zaprojektowany jako rozwiązanie modułowe, unit A-dec 300 jest kompleksowym systemem, umożliwiającym wybór właśnie tych funkcji, których potrzebujesz, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu kosztów.

Elastyczność

Wersja Traditional lub Continental – wybór należy do Ciebie. Bez względu na to, czy wybierzesz konsolę zamocowaną po lewej lub po prawej stronie, czy też konfigurację obrotową typu Radius®, końcówki i inne oprzyrządowanie znajdują się zawsze w Twoim zasięgu.

Komfort

Technologia mapowania nacisku pacjenta na tapicerkę oraz ruch „kołyskowy” fotela zapewniają komfort i relaks pacjenta. Fotel pozwala wygodnie umieścić pacjentów o wadze do 181 kg (400 funtów).

Dostęp

Gdy pacjent wygodnie opiera się na zagłówku z podwójną regulacją, masz do niego ergonomiczny dostęp dzięki zastosowaniu bardzo cienkiego oparcia o wąskim profilu. Ta kombinacja, będąca efektem naszego wieloletniego doświadczenia, zapewnia wygodną i komfortową pozycję pracy oraz ułatwia dostęp do jamy ustnej pacjenta.





Ergonomiczny i ekonomiczny

Kto mówi, że najwyższy komfort jest nieosiągalny? Wyprodukowanie każdego fotela oraz stołka dentystycznego lub asysty poprzedzają lata badań, konsultacji, testów i ulepszeń. Stale analizujemy wszystkie profile, linie oraz kształty, aby upewnić się, że zapewniają najlepszą wydajność i komfort. Zapewniamy: Korzystny cenowo unit A-dec 300 nie jest tutaj wyjątkiem.

Dostosuje się do Ciebie

Wersja z blokiem i konsolą mocowaną do podłogi (Pedestal) lub obrotowa (Radius) – wybór należy do Ciebie. W obu przypadkach końcówki znajdują się w zasięgu ręki i zapewniają bezproblemową obsługę pacjenta.



Blok spluwaczka/ konsola/lampa montowany do podłogi A-dec 300

Konsole w wersji Traditional (rękawki od dołu) lub Continental (rękawki od góry) to kolejny Twój wybór. Przeznaczone dla lekarzy prawo- lub leworęcznych konsole zapewniają łatwy dostęp do separatora amalgamatu oraz elegancko obudowanej skrzynki przyłączeniowej, która eliminuje nadmiar sprzętu znajdującego się na zewnątrz.



Unit A-dec 300 typu Radius

Łatwa zmiana ustawienia dla operatorów prawo- lub leworęcznych. Pojedyncze lub podwójne mocowania typu Radius pozwalają na obrót konsoli, bloku spluwaczki i lampy dokoła przedniej części fotela w celu zapewnienia lepszego dostępu do pacjenta podczas zabiegu (lampa może być również mocowana na suficie lub ścianie).



Sterownik nożny

Sterownik nożny A-dec zapewnia pełną kontrolę. Intuicyjna obsługa za pomocą przełącznika pracy z wodą/bez wody oraz przycisk wyboru przedmuchu/akcesoriów umożliwiają skupienie się na pacjencie bez odwracania wzroku. Minimalny ruch stopy wystarczy, aby uzyskać precyzyjną regulację elektrycznych i pneumatycznych końcówek.

Tyle możliwości



Tapicerka szwowa z podłokietnikami



Traditional



Standardowy panel sterowania



Kołowy sterownik nożny



Tapicerka bezszwowa bez podłokietników



Continental



Panel sterowania Deluxe



Dźwigniowy sterownik nożny

Tapicerka i podłokietniki

Wszystko zaczyna się od doskonałego fotela. Masz do wyboru wiele możliwości — od miękkiej szwowej lub łatwej w czyszczeniu bezszwowej tapicerki, po opcjonalne podłokietniki dwupozycyjne lub brak podłokietników.

Konsolety

W jakie sposób pracujesz Ty i Twój zespół stomatologiczny? Zarówno do konsoly Traditional, jak i do konsoly Continental można podłączyć zasilacz do światła z czteropozycyjnym wyborem napięcia zasilania i dwa dodatkowe urządzenia.

Panel sterowania

Uproszczona i szybka regulacja fotela, lamp dentystycznych i spluwaczki dzięki panelowi dotykowemu. Opcjonalny panel dotykowy w wersji deluxe umożliwia dodatkowo sterowanie zintegrowanymi urządzeniami klinicznymi, np. silnikami elektrycznymi, aparatami fotograficznymi i skalerami.

Sterowniki nożne

Sterownik okrągły z funkcją przedmuchu końcówek lub, wielofunkcyjny sterownik A-dec zapewniający precyzyjną regulację elektrycznych i pneumatycznych końcówek.



Nieruchoma szklana spluwaczka



Uchwyt 3-pozycyjny



Uchwyt 4-pozycyjny



Podwójny uchwyt 2-pozycyjny



A-dec 300 lampa LED



A-dec 500 lampa LED



Mocowanie monitora Radius



Mocowanie monitora Light



Mocowanie monitora Light z ramieniem



Obrotowa spluwaczka z porcelany

Spluwaczki

Szkoło czy gładka porcelana?
Zamocowana na stałe czy obrotowa?
Obie misy posiadają funkcje
automatycznego napełniania kubka i
splukiwania.

Panel asysty

Umieść narzędzia asysty tam, gdzie
są najbardziej potrzebne. Regulowane
3- lub 4-pozycyjne uchwyty są
dostępne w wersjach mocowanych
do fotela, spluwaczki lub na ramieniu
teleskopowym.

Lampy stomatologiczne

Odpowiednie oświetlenie to podstawa.
Lampy LED firmy A-dec zapewniają
światło o równomiernej intensywności i
jednolity obszar naświetlenia bez cieni.
Funkcja automatycznego włączania i
wyłączania, gdy fotel jest przestawiany
do pozycji wejścia lub zejścia pacjenta.


Mocowania monitorów

Konsultacja. Edukacja. Podgląd.
Mocowania monitorów zapewniają
widoczność w pozycji siedzącej oraz
leżącej. Dobierz optymalne dla Ciebie
opcje – płynne przechylenie lub
blokowanie pozycji monitora, uchwyt
do ustawiania pozycji monitora oraz
różnorodne lokalizacje mocowania
monitora.

Tapicerka bezszwowa



Kolor ma duże znaczenie w tworzeniu odpowiedniej atmosfery. To dlatego firma A-dec oferuje szeroki zakres kolorów i opcji do zastosowania ze szwowymi i bezszwowymi tapicerkami.

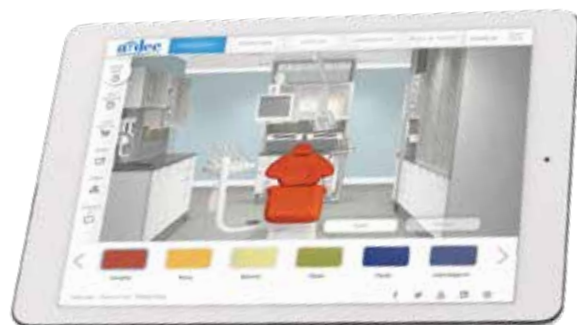

**Zamów próbki na stronie
a-dec.com/InspireMe**

Tapicerka szwowa



Rzeczywiste kolory mogą się różnić. Z próbkami kolorów i najnowszymi informacjami na temat produktów można zapoznać się u autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.

Dane techniczne

Fotel dentystyczny A-dec 300

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zakres ruchu | Od 349 mm (13,75 cala) do 800 mm (31,5 cala); najniższy punkt 375 mm (14,75 cala) w wersji z dwiema opcjami montażu |
| Cienkie, elastyczne oparcie fotela | 32 mm (1,25 cala), tapicerka bezszwowa |
| Układ napędowy | Napęd hybrydowy (elektromechaniczny dla oparcia i hydrauliczny dla siedziska) |
| Wyłącznik ruchu oparcia i siedziska | Tak, zatrzymuje ruch w dół w momencie wykrycia przeszkody w torze ruchu |
| Zagłówek | Z podwójną regulacją, przesuwany (pokrętło) |
| Zintegrowany zasilacz 300 W | Tak |
| Sterownik nożny | Opcja |
| Możliwość montażu | Ruchomy – na 5-centymetrowym (2 cale) drążku mocowanym do podstawy, lub typu Radius (pojedyncza lub podwójna opcja montażu) |
| Rodzaje tapicerek | Szwowa lub bezszwowa |

Konsolety

| | A-dec 300 Continental | A-dec 300 Traditional |
|---|--|---|
| Blok sterowania końcówkami | Standardowy 3-pozycyjny, opcjonalny 4-pozycyjny | Standardowy 3-pozycyjny, opcjonalny 4-pozycyjny |
| Przystosowanie do obsługi lewą/ prawą ręką | Tak | Tak |
| Rękawy końcówek | Winył lub silikon | Winył lub silikon |
| Liczba pozycji uchwytu na końcówki (poza dmuchawką) | 4 | 4 |
| Uchwyt(y) hamulca konsolety | 1 standardowo, 2 opcjonalnie | 1 standardowo, 2 opcjonalnie |
| Opcje panelu sterowania | Brak, standard lub Deluxe | Brak, standard lub Deluxe |
| Czteronapięciowy zasilacz do światła | Opcja | Opcja |
| Sterownik nożny pracą końcówek | Okrągły z funkcją przedmuchu końcówek lub wielofunkcyjny (dźwignia przesuwu) | Okrągły z funkcją przedmuchu końcówek lub wielofunkcyjny (dźwignia przesuwu) |
| System ramion | Wyważone ramię ruchome wielopłaszczyznowo z hamulcem pneumatycznym A-dec 333 – mocowanie typu Radius A-dec 335 – mocowanie na nieruchomym bloku spluwaczki | Wyważone ramię ruchome wielopłaszczyznowo z hamulcem pneumatycznym A-dec 332 – mocowanie typu Radius A-dec 334 – mocowanie na nieruchomym bloku spluwaczki Blokowanie ustawienia ręczne A-dec 336 – mocowanie typu Radius |









Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 w USA/Kanadzie
Tel: +1.503.538.7478 spoza USA/Kanady
Faks: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australii

Tel: 1.800.225.010 z Australii
Tel: +61.(0)2.8332.4000 spoza Australii

A-dec Chiny

Tel: +400.600.5434 z Chin
Tel: +86.571.89026088 spoza Chinami

A-dec Wielkiej Brytanii

Tel: 0800.233285 z Wielkiej Brytanii
Tel: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii

Kolory i produkty przedstawione w niniejszej broszurze mogą różnić się od rzeczywistych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zapoznania się z najnowszą ofertą oraz kolorystyką tapicerek zapraszamy do salonów autoryzowanych dystrybutorów firmy A-dec.

Wszystkie znaki towarowe występujące w tym dokumencie są znakami towarowymi należącymi do firmy A-dec, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich wspólnych dostawców w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.