


A-dec 300®

A blue dental chair with a headrest and armrests, set against a background of a window with a grid pattern. The chair is the central focus, with its blue upholstery and light-colored frame clearly visible. The background is a bright, out-of-focus window with a grid pattern, suggesting a clinical or office setting. A dark blue rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the text 'A-dec 300®' in white.

A-dec® 与众不同

专为使用一生而设计

在A-dec，我们重视每一个细节，甚至精确到产品上所使用的螺钉。这就是为什么我们的大部分牙科设备成品都是从原材料开始进行生产制造的 - 这是我们能确保质量的重要原因。因为尽管我们的肉眼可能看不到这些零件，但它们对于每一个承载着我们的名称的产品寿命、舒适感和功能都起到了决定性的作用。而对于你的事业来说，这就是一切。

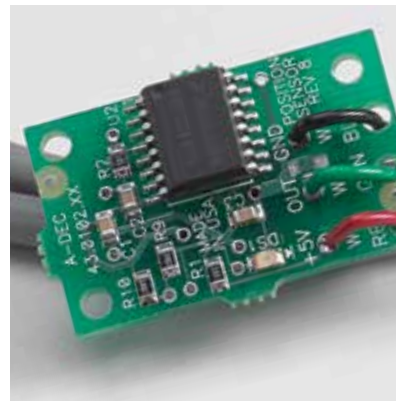

- 控制阀** - 此专利设计有助于在每一次启动时提供清洁的治疗用水。
- 液压缸提升装置** - 由A-dec设计并制造，使用坚固的液压升降系统和更少的零部件。
- 治疗椅定位传感器** - A-dec技术使用精确的电子传感器和数字信号。







A-dec 300: 升级

设计

硬质底座是治疗椅稳固的基础，伴随这一可靠的基础，A-dec 300采用20年经久不衰的液压缸提升装置将患者安静平稳地定位。

价值

A-dec 300是一个采用模块化解决方案设计的完整系统，可供您在预算范围内挑选所需的功能。

灵活性

下挂式或上挂式任您挑选。无论是选择专用于左/右手的牙科治疗台还是左右手兼容的Radius®型配置，牙科手机和辅助设备总是触手可及。

舒适性

压力映射、流线型表面和模拟枢轴靠背保证了患者放松且受良好支撑的就诊体验。完全可以承载重达181千克（400磅）的患者。

易操作性

双关节头枕支撑使您的患者舒适地休息，而纤细的轮廓和超薄型椅背使您的操作更加方便。通过多年的经验设计，该组合可为您提供更佳的位置，同时为口腔治疗操作提供极大便利。





符合人体工程学且经济实惠

谁说无法实现极致的舒适性？几十年的研究、讨论、测试和改进支撑着我们设计的每一台牙科治疗椅以及牙医或牙医助理座椅。我们从未停止改进每一处线条和轮廓，使之简单而流畅，从而确保设备提供极致的高效和舒适性。请放心：经济实惠的A-dec 300也不例外。

按照您的方式工作

基座式或Radius式任您选择。这两种安装方式的设备都能触手可及，以便您可以进行不间断的患者护理。



A-dec 300 基座式支撑中心

下挂式或上挂式牙科治疗台将技术融入到您的手术中。专用于左/右手的牙科治疗台提供了方便操作的汞合金分离器，以及光滑的流线型地箱，从而隐藏了暴露在外的硬件。



A-dec 300 Radius牙科治疗台

轻松切换右手或左手操作。单/双
Radius底座可围绕牙科治疗椅前端旋
转，从而易于在操作过程中对患者进行
治疗操作。



拨杆式脚踏开关

A-dec的拨杆式脚踏开关帮助您进行完美操控。直观的湿态/干态左右拨动控制和吹屑/附件按钮使您能够专注于治疗患者而无需移开视线。
您可以通过最少的脚部移动精确调节电动和气动牙科手机。

众多选择



带有扶手的缝制皮垫



下挂式



标准触控板



圆盘式脚踏开关



不带扶手的无缝皮垫



上挂式



豪华触控板



拨杆式脚踏开关

皮垫和扶手

这一切都始于出色的治疗椅。您有丰富的选择，从豪华的缝制皮垫或易于清洁的无缝皮垫，到可选的双位置扶手或无扶手。

牙科治疗台

您和您的工作人员如何工作？下挂式和上挂式牙科治疗台上均可装配四组电压输出的内窥镜光源电路板和两个辅助设备。

触控板

指触操作不仅简化了治疗椅调节，还使您可以轻松操控口腔灯和痰盂。可选购的豪华触控板添加了对集成式临床设备（例如电动马达、口腔内窥镜和洁牙器）的控制。

脚控开关

带有吹屑功能的圆盘式或A-dec拨杆式脚踏开关可精确调节电动或气动牙科手机。



固定玻璃痰盂



旋转陶瓷痰盂

痰盂

您更喜欢玻璃还是陶瓷？固定式还是旋转式？这两种痰盂都包括定时口杯注水和痰盂冲洗功能。



3位置托架



4位置托架



2位置双托架

牙医助理器械托架

将牙医助理的临床设备放置在最方便使用的位置。可调节的3或4位置托架可用于治疗椅安装、痰盂安装或伸缩臂。



A-dec 300 LED



A-dec 500 LED

口腔灯

选择适当的照明设备十分重要。A-dec LED 灯可提供平衡的光线强度和均衡的光线模式，从而不会产生阴影。在治疗椅移至进/出位置时自动打开/关闭。



Radius显示器支架



灯臂安装式显示器支架



带连接臂的灯臂安装式显示器支架


显示器支架

咨询。教育。查看。显示器支架可转动以适应患者从坐姿和仰卧位置查看。定制您的选项，包括锁定方式或浮动支点、定位手柄和多种安装位置。

无缝皮垫



在打造体现您风格的环境时，颜色可以起到关键性的作用。这就是为什么A-dec提供了多种颜色和选项来匹配无缝和手工缝制皮垫。

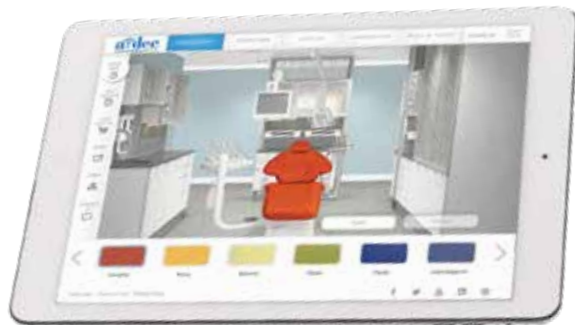

订购您的实样，网址为
a-dec.com/InspireMe

手工缝制皮垫



实际颜色可能不同。请与A-dec授权的当地经销商联系，以便了解实样的颜色以及产品的最新信息。

规格

A-dec 300型牙科治疗椅

提升高度范围	349毫米至800毫米（13.75英寸至31.5英寸）；最低点为375毫米（14.75英寸），配有两个安装位置
轻薄且可弯折的椅背	32毫米（1.25英寸），无缝
驱动系统	混合动力驱动（电动椅背，液压椅座）
椅背和座椅止动开关	是，当检测到障碍物时停止向下移动
头枕	双关节且可滑动头枕（旋钮式）
内置300瓦电源	是
脚踏开关	可选购
安装功能	浮动 - 2英寸（50.8毫米）柱装式、基座式或Radius（单/双安装）
皮垫选项	手工缝制或无缝

牙科治疗台

	A-dec 300 上挂式牙科治疗台	A-dec 300 下挂式牙科治疗台
控制阀	3组（标准）， 4组（可选购）	3组（标准）， 4组（可选购）
是否能左/右对换	是	是
导管选择	塑胶或硅胶	塑胶或硅胶
牙科手机托架位置	4	4
制动手柄	1个（标准），第2个（可选购）	1个（标准），第2个（可选购）
触控板选项	无、标准或豪华	无、标准或豪华
四组输出电压内窥镜光源	可供选购	可供选购
脚踏开关	标准、吹屑或拨动杆	标准、吹屑或拨动杆
支撑臂系统	平衡屈臂，带有气动制动器 A-dec 333 - Radius安装式 A-dec 335 - 支撑中心安装式	平衡屈臂，带有气动制动器 A-dec 332 - Radius安装式 A-dec 334 - 支撑中心安装式 手动高度调节 A-dec 336 - Radius安装式









A-dec总部

克雷斯特维街2601号
美国俄勒冈州纽伯格, 邮编: 97132
电话: 1.800.547.1883 美国/加拿大境内
电话: +1.503.538.7478 美国/加拿大境外
传真: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec澳大利亚分公司

电话: 1.800.225.010 澳大利亚境内
电话: +61.(0)2.8332.4000 澳大利亚境外

A-dec中国

电话: 400.600.5434 中国境内
电话: +86.571.89026088 中国境外

A-dec英国分公司

电话: 0800.233285 英国境内
电话: +44.(0).24.7635.0901 英国境外

所示的颜色和产品可能会与实际材料稍有不同; 并可随时更改, 恕不另行通知。有关实际颜色的样品和最新的产品信息, 请与您所在地区获授权的A-dec经销商接洽。

本文件上的所有商标均受A-dec、其关联机构及其在美国和美国以外国家/地区的集体供应商的商标权的保护。

©2021 A-dec Inc. 保留所有权利。
85.6152.06/1.5M/BB/11-21/Rev K