

A-dec® 400

a dec®



# A-dec与众不同

您可以依赖A-dec产品稳定地进行工作，以便专注于最重要的部分：患者。

消除停机时间。保持低维护成本。实现持久性能。

没有哪个制造商同A-dec一样在设计、构建和支持产品方面进行如此多的研究和投入。这也是全世界的牙科医生、牙科学校和诊所都选择A-dec的原因。



附带 5 年的质量保证。








# 易操作。坚固。时尚。

A-dec 400型将样式与功能进行了结合，以降低复杂性并以极其吸引的价格提供更多款式。

A-dec 400型不仅可以为患者带来舒适感，而且当您在进行口腔治疗时也不会感到任何不适。

而且，当您总结其坚固的构造、现代风格和左/右手操作多用性后，您获得的是市场上最具长期价值的治疗台。

A-dec 400型采用了考虑周到的牙科治疗台设计方式。

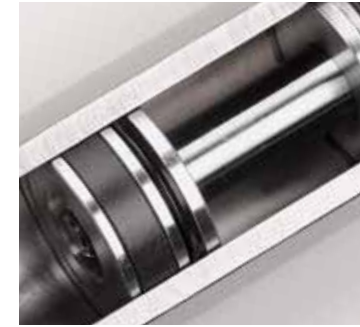

## 体验卓越的可靠性。

智能化设计。减轻疲劳的功能。备受赞誉的可靠性。A-dec源于创新且简单的设计理念。使用A-dec 400型，您就可以获得高度易用性。日复一日。年复一年。

# 自然舒适

降低焦虑感的关键在于患者是否舒适。A-dec 400型治疗椅设计有助于使患者感到放松。

**模拟枢轴。** 将治疗椅的移动与患者的人体结构和身体活动融为一体。

**双关节头枕。** 轻松进行调节，以获取最佳的患者治疗位置。

**双位置扶手。** 将舒适的支撑臂/肘与坚固的负重设计结合，以方便患者进和出。

**脚踏板联动设计。** 可向患者提供舒适的小腿支撑。

**充实的衬垫。** 包括柔滑精密无缝型和豪华缝制型两种类型，并且它们均提供多种设计颜色供选择。















# 确保职业健康

工作效率和职业生涯的关键是在工作的同时，保持舒适感。这也是A-dec 400型旨在保持您的动作流畅并符合人机工程学的原因。

**超薄且可弯折的椅背。**双关节头枕撑托可使您的患者舒适地休息，而配置较少的超薄型椅背通过允许您将双膝置于治疗椅下，可使您更加方便地进行操作。此头枕和椅背组合依靠多年的实践经验设计而成，可为您提供更佳的位置，同时为口腔治疗操作提供更大的便利。

**较低的底座下降位置。**不论医生的高度如何，皆可舒适地进行工作。

**符合人机工程学的牙科治疗台选件。**将牙科手机和辅助设备置于触手可及的位置，减少不必要的移动，同时保持专注。





# A-dec 400型的多功能性和卓越的可靠性

与其他所有A-dec产品一样，A-dec 400型旨在使牙科团队更轻松地进行治疗、为患者提供最佳的舒适度，以及实现长年无忧的高可靠性。

**可提高工作效率的左/右手操作多用性。**精确的左右手配置可满足牙科医生各种不同的偏好。Radius式牙科治疗台和支撑模块可快速轻松地围绕治疗椅旋转，以完全兼容全左/右手操作。

**治疗台内部的感染控制。**牙科治疗台的“心脏”是一个控制阀，用来保证患者健康和可靠性能。最大程度地减少了水流阻塞和停滞。每次启动牙科手机时，水会不断循环流动。

**独立水管线路维护系统。**为了防止污秽、异味和变质，A-dec导管由抗菌的AlphaSan®制作而成。并且，2升水瓶的内置吸水管和快速拆解装置使您可以轻松地拆卸水瓶并进行更换，同时也可减少发生交叉感染的几率。

## 左右手全方位操作。

配置您想要的工作方式。牙科治疗台可以安装在治疗椅的前面、机柜的侧面或后面或者墙上。牙医助理器械提供短臂或长臂，并且同样可以左右对换。







# 无缝集成

A-dec 400型牙科治疗椅和A-dec 300型牙科治疗台将精巧的易操作性和醇厚款式进行了完美的结合。  
A-dec 300型牙科治疗台不仅外观精巧，而且功能强大。

**轻松、智能控制。** A-dec 300型精选触控板和脚踏控制板可以配合使用，以简化对牙科手机、集成的配件、牙科治疗椅及牙科手术灯功能的控制。预设置您的口腔内窥镜、超声波仪器、光固化灯，以及最多两台电动马达。

**可进一步升级。** 牙科治疗台平台允许您集成最新的临床创新产品，并且可适应日后的技术发展。

**按钮式转臂制动器（指定的组件）。** 将牙科治疗台锁定在所需的高度，以实现最佳的易用性和人机工程学。

## 可实现完美组合的牙科治疗台。

将所有牙科手机和辅助设备置于所需的位置。您的牙科治疗台可以是上挂式，也可以是下挂式。



# A-dec 400型选件

## 牙科治疗台

为了方便您取放牙科手机和配件，我们提供了四种符合人机工程学的牙科治疗台：A-dec 300型治疗椅安装式牙科治疗台（下挂式和上挂式）；A-dec 500型机柜安装式牙科治疗台（双功能后置式和侧边式）。

## 牙科手术灯

无论您是选择A-dec 300 LED还是500 LED，均可获得均衡的亮度和没有多余阴影的均衡灯光照射区。A-dec口腔灯会在治疗椅后仰时自动打开，而在治疗椅移至进入/退出档位时关闭。

## 治疗椅安装式牙医助理器械

提供了短臂和长臂两种类型，而且集成了触控板。单支3孔和4孔托架，以及双支2孔托架可供您选择。

## 显示器底座

双支臂包括预连接的HDMI和电源线。支撑架侧显示器底座可旋转430°，枢轴最大可旋转85°，方便您座视和仰视。

## 痰盂

由具有防污性能的玻璃瓷制成。可向两侧各旋转90°，更方便患者使用。通过触控板，您可以对定时口杯注水和痰盂冲洗功能进行设置。



## 无缝皮垫



在创建体现您风格的环境时，颜色可以起到关键性的作用。这就是为什么A-dec精心挑选了多种颜色和选项来匹配无缝和手工缝纫皮垫



订购您的实样，网址为  
[a-dec.com/InspireMe](http://a-dec.com/InspireMe)

## 手工缝纫皮垫



实际颜色可能不同。请与A-dec授权的当地经销商联系，以便了解实样的颜色以及产品的最新信息。

# 技术规格

## A-dec 411型牙科治疗椅

提升高度范围	13.75英寸至31.5英寸 ( 349毫米至800毫米 ) ;最低点为14.75英寸 ( 375毫米 ) , 配有两个安装位置
完全展开时的总长度	72英寸 ( 1829毫米 )
轻薄且可弯折的椅背	1英寸 ( 25毫米 )
治疗椅最大旋转角度	60° ( 从中间向两侧各旋转30° )
左/右对换	是
双关节、可滑动的头枕	是
内置300瓦电源	是
指触或脚踏控制板	都有
驱动系统	混合驱动 ( 机电倾斜装置, 液压基座 )
衬垫选件	缝制型或无缝型
显示器底座选件	牙科手术灯、显示器臂

## 牙科治疗台

	A-dec 500型后置式	A-dec 500型侧边式	A-dec 300型
总控阀	4组	4组	3组 ( 标准 ) , 4组 ( 可选购 )
是否能左/右对换	是	否	是
牙科手机挂架孔个数	4个	4个	4个
制动手柄	不适用	1个	1个 ( 标准 ) , 第2个 ( 可选购 )
是否提供豪华触控板	是	是	是
四组输出电压内窥光源	标准	标准	可选购
脚踏开关	湿/干开关, 配有吹屑功能或操纵杆	湿/干开关, 配有吹屑功能或操纵杆	湿/干开关, 配有吹屑功能或操纵杆的湿/干开关
承重转臂, 带有气动制动器	不适用	是	是, 但A-dec 336型除外
型号	A-dec 541型双功能后置式	A-dec 542型侧边式	承重转臂, 带有气动制动器 A-dec 333型 - 上挂式Radius安装式 A-dec 335型 - 上挂式支撑安装式 A-dec 332型 - 下挂式Radius安装式 A-dec 334型 - 下挂式支撑安装式 手动高度调节 A-dec 336型 - 下挂式Radius安装式





# 助您成功的合作伙伴



使用A-dec，您将获得有助于您诊疗事业的合作伙伴。我们的总部设在俄勒冈州纽伯格，由总部向全球办事处以及遍布全世界100多个国家/地区的特定经销商网络提供支持。

**发现A-dec与众不同之处。**访问[a-dec.com/TheDifference](http://a-dec.com/TheDifference)，查看A-dec解决方案背后的每个细节如何确保投资的可靠与持久。



## A-dec总部

克雷斯特维街2601号  
美国俄勒冈州纽伯格，邮编：97132  
电话：1.800.547.1883 美国/加拿大境内  
电话：+1.503.538.7478 美国/加拿大境外  
传真：+1.503.538.0276  
[a-dec.com](http://a-dec.com)

## A-dec澳大利亚分公司

电话：1.800.225.010 澳大利亚境内  
电话：+61.(0)2.8332.4000 澳大利亚境外

## A-dec中国

电话：400.600.5434 中国境内  
电话：+86.571.89026088 中国境外

## A-dec英国分公司

电话：0800.233285 英国境内  
电话：+44.(0).24.7635.0901 英国境外



本产品介绍册中所示的产品及其颜色可能会与实际材料稍有不同；并可随时改变，恕不事先通知。请与获A-dec授权的当地经销商联系，以便亲眼察看实际的样品颜色，并了解产品的最新信息。

本文件上的所有商标均受A-dec、其关联机构及其在美国和美国以外国家/地区的集体供应商的商标权的保护。

©2021年A-dec Inc.保留所有权利。  
85.0393.06/E-only/4-21/Rev B