

Sedáky

A-dec® Sedáky

Sezení pro náročné



a dec®

Funkční židličky A-dec 500.

Dokonalé pohodlí pro celý dentální tým

Svým pacientům budete poskytovat nejlepší péči, když budete moci pracovat pohodlně. Nyní vám právě to umožňují unikátní ergonomické židličky A-dec 500.

Inovativní židličky A-dec 500, které jsou výsledkem mnohaletého výzkumu, jsou strategicky zkonstruovány tak, abyste se na nich cítili co nejlépe, a mohli tak při práci podávat co nejlepší výkon.




Židličky, které napomáhají zdravému držení těla.



Sedáky A-dec 500 jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily vašemu tělu a pohybovaly se spolu s ním. Vezměte si například dynamický sedák. Všechno, od odpruženého rámu až po pružné materiály, které se přizpůsobí tvarům vašeho těla, má jediný účel: poskytovat pohodlí a správnou podporu. Pomocí snadno přístupných páček, které umožňují dokonalé přizpůsobení, můžete židličku seřídit tak, abyste během celého dne neustále udržovali ergonomicky správné a zdravé držení těla.

Zdravá poloha vsedě

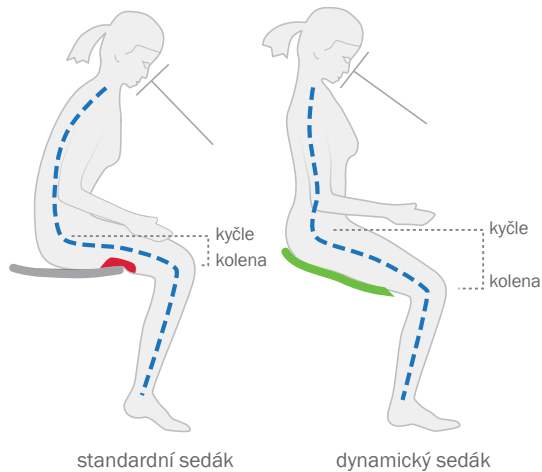

Naší reakcí na potřebu ergonomicky správného držení těla je možnost přizpůsobit polohu při sezení tak, abyste neměli ohnutá záda, což je velmi škodlivé. Zdravé poloze vsedě se říká „atletické držení těla“. Když máte vsedě kyčle výš než kolena a opěradlo máte nastavené nízko a nakloněné dopředu, může si vaše páteř udržovat zdravou polohu ve tvaru písmene S. Dynamický sedák vám poskytuje pohodlí i lepší funkčnost.

Čtyři možnosti nastavení



Správné držení těla snižuje zatížení kloubů a páteře a umožňuje lepší krevní oběh v končetinách. Židličky A-dec 500 mají snadno rozeznatelné páčky, které umožňují jemně upravovat během dne nastavení jednotlivých prvků, což je obzvláště důležité v případě, že sedák používá více různých osob.

Dynamický sedací systém



Tři vrstvy pružného materiálu se přizpůsobují každému vašemu pohybu:

- 1. Pěnové polstrování** (horní vrstva) – Dotváří konečnou úroveň pohodlí.
- 2. Komfortní pružná armatura** (střední vrstva) – Tvoří povrch, který se přizpůsobuje tvarům vašeho těla ve čtyřech funkčních zónách.
- 3. Pružný rám** (základ) – Působí jako opora při pohybech většího rozsahu.

Židličky A-dec 500

Dynamická opora

Naše sedáky A-dec 500 s řadou inovativních prvků mají dynamický sedací systém s unikátními funkčními zónami, které se vytvarují podle kontur vašeho těla. Tyto funkční zóny vám ve společné souhře poskytují potřebnou oporu při všech pohybech během práce. Další prvky, jako například tvarované opěradlo, udržují vaši páteř jako v bavlnce. Díky ergonomickým řešením pro optimální sezení od firmy A-dec se můžete zaměřit na to nejdůležitější – na své pacienty.

	Židlička A-dec 521 pro lékaře	Židlička A-dec 522 pro asistenty
Dynamický sedací systém	•	•
Neslyšná kolečka	•	•
Tvarované opěradlo	•	volitelně
Nastavitelný sklon sedáku	•	pouze s volitelným opěradlem
Výklopné područky	volitelně	
Výškově nastavitelný opěrný kruh pro nohy		•
Opěrka pro nohy		volitelně



**Židličky A-dec 521
pro lékaře**



Neslyšná kolečka

Jejich konstrukce zajišťuje hladký, velice tichý pohyb jak na koberci, tak na tvrdé podlahové krytině.



Nastavovací prvky

Snadno přístupné očíslované páčky umožňují rychlou úpravu nastavení a snadné čištění.




Nastavená výška opěradla

Dobře přístupným tlačítkem lze snadno upravit nastavení i jednou rukou.

Židlička A-dec 521 pro lékaře Zjistěte si správnou výšku

Abyste zvolili správnou výšku židličky, změřte si vzdálenost od kyčlí po chodidla.

Více než 86,4 cm (34 palců) – zvolte vysoký válec
Méně než 86,4 cm (34 palců) – zvolte nízký válec

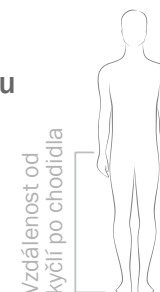

Vzdálenost od kyčlí po chodidla

Sedák A-dec 522 pro asistenty s volitelnou opěrkou pro nohy a opěradlem



Sedák A-dec 521 pro lékaře s volitelnými výklopnými područkami



Volitelná opěrka pro nohy

Nahrazuje opěrný kruh pro nohy za účelem lepšího rozložení hmotnosti mezi hýžděmi a chodidly tak, aby bylo dosaženo „atletického držení těla“.

Židličky A-dec 500 Možnosti a doplňky

Volitelné výklopné područky

Tři nastavitelné parametry – šířka, výška a natočení – vám poskytují lepší podporu a pohyblivost.

- Při práci v ústní dutině si můžete opřít předloktí o područky
- Područky lze snadno odsunout stranou, aby nepřekážely
- Také si můžete nastavit výšku područek



Židlička A-dec 400

Špičková trvanlivost

Zasloužíte si mít pohodlné výrobky k sezení, které také dlouho vydrží. Naše řešení odolných židliček již celá léta pomáhají stomatologům sedět ve zdravé poloze se správnou oporou. Takové prvky jako anatomicky tvarované opěradlo, nastavitelná opora trupu, zaoblené okraje sedáku a ergonomický náklon snižují tlak na meziobratlové ploténky a omezují bolesti zad.

Vyberte si prošivané nebo bezešvé čalounění v některé z široké škály barev, která jistě vhodně doplní vaši ordinaci. Příště si kupte sedáky od společnosti A-dec – jsme tu pro vás.

	Židlička A-dec 421 pro lékaře	Židlička A-dec 422 pro asistenty
Tvarované opěradlo	•	
Tvarovaný sedák	•	•
Ergonomický náklon	•	
Nastavitelná podpora trupu		•
Snadno přístupné seřizovací páčky	•	•
Výškově nastavitelný opěrný kruh pro nohy		•

Poznámka: Sedáky A-dec 400 nezahrnují dynamický sedací systém, který je standardně dodáván se sedáky modelové řady 500.

Židlička A-dec 422 pro asistenty

Židlička A-dec 421 pro lékaře



Židlička A-dec 421 pro lékaře Zjistěte si správnou výšku

Abyste zvolili správnou výšku židličky, změřte si vzdálenost od kyčlí po chodidla.

Více než 81,2 cm (32 palců) – zvolte vysoký válec

Méně než 81,2 cm (32 palců) – zvolte nízký válec



Volby čalounění a barev

Nejdůležitější je správný odstín

Pomocí barev si můžete vytvořit ordinaci, která věrně odráží vaši osobnost. Vyberte si ze široké škály barev bezešvého nebo prošivaného čalounění židliček A-dec 421 a A-dec 422. U židliček A-dec 521 a A-dec 522 je k dispozici pouze prošivané čalounění. Nechte se inspirovat na webové adrese a-dec.com/InspireMe.

Prošívané čalounění (pro židličky A-dec 500 a A-dec 400)




Bezešvé čalounění (pro židličky A-dec 400)



Skutečné barvy se mohou lišit. Vzorky barev a neaktuálnější informace o produktech vám poskytné autorizovaný prodejce společnosti A-dec.

Vzorky si můžete
objednat na adrese
a-dec.com/Color

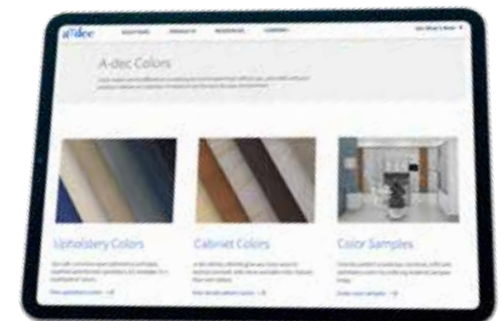



a|dec



a|dec
reliablecreativesolutions

Ředitelství A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 pro USA/Kanadu
Tel: +1.503.538.7478 mimo USA/Kanadu
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Austrálie

Tel: 1.800.225.010 Within v Austrálii
Tel: +61.(0)2.8332.4000 mimo Austrálii

A-dec China

TTel: 400.600.5434 v rámci Číny
Tel: +86.571.89026088 mimo Čínu

A-dec Velká Británie

Tel: 0800.233285 ve Velké Británii
Tel: +44.(0).24.7635.0901 mimo Velkou Británii



Další informace o ergonomických židličkách A-dec a možnost vyžádat si doplňkové ergonomické posouzení najdete na webové adrese a-dec.com/500stools.

Zobrazené barvy a produkty se mohou od skutečných materiálů lišit a podléhají změnám bez upozornění. Přesné vzorky barev a nejaktuálnější informace o produktech vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti A-dec.

©2023 A-dec, Inc. Všechna práva vyhrazena.
85.6072.11/BB/500/6-22(2-23)/Rev C2